

BIOEASY

IMMUNOAFFINITY COLUMN



GİRİŞ

BIOEASY Immunoaffinity kolonları, hedefleri spesifik olarak adsorbe eden, safsızlıkları gideren ve eser miktarda toksin için zenginleştiren ve saflaştıran spesifik antikorlarla immobilize edilmiş dolgu maddesinden oluşur.

HPLC, LC-MS / MS, ELISA vb. ile analizlerden önce mikotoksinlerin saflaştırılması ve konsantrasyonu için kullanılabilir.

AVANTAJLAR

Yüksek
Özgüllük

Yüksek
Geri Dönüşüm


Yüksek
Doğruluk

Yüksek
İstikrar

BIOEASY IAC nasıl çalışır?

Immunoafinite kolonları, jel partiküllerine bağlanmış toksine özgü antikorlar içeren bir jel yatağı içerir.

Bu antikorlar, bir numunede ilgilenilen analitleri yakalar ve safsızlıkların kolondan temizlediği bir yıkama adımından sonra bunları serbest bırakır.

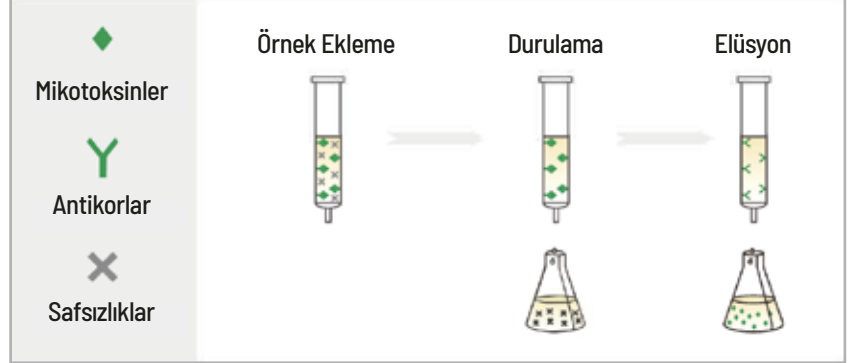

Ürün Özellikleri

Raf ömrü: 24 ay

Depolama: 2~8°C, donma olmamalı

* Özelleştirilmiş hizmetler mevcuttur.

* Bilgiler sadece referans amaçlıdır, lütfen uygun şekilde kullanınız.

Ürün Kodu (Art. No.)	Ürün (Product)	Geri Kazanım Oranı (Recovery Rate)	Kapasite (Capacity)	Özellikler (Specifications)
YRIAC3001-1C	Aflatoxin B1, B2, G1, G2	>90%	300 ng	3ml, 25pcs
YRIAC3001-2C	Aflatoxin B1	>90%	200 ng	3ml, 25pcs
YRIAC3002-1C	Aflatoxin M1	>90%	100 ng	3ml, 25pcs
YRIAC3003-1C	Zearalenone (ZEN)	>90%	2000 ng	3ml, 25pcs
YRIAC3004-1C	Deoxynivalenol (DON)	>90%	2000 ng	3ml, 25pcs
YRIAC3005-1C	Ochratoxin A (OTA)	>90%	300 ng	3ml, 25pcs
YRIAC3006-1C	T-2 Toxin	>90%	2000 ng	3ml, 25pcs
YRIAC3007-1C	Fumonisin (FUM)	>90%	>5000ng	3ml, 25pcs



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr

Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...