



NEOGEN®

AccuPoint® Advanced Next Generation Kusursuz Sanitasyon İzleme Sistemi



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

Yeni Nesil Sanitasyon Doğrulaması

NEOGEN®'in yeni AccuPoint® Gelişmiş Yeni Nesil (NG), adenozin trifosfatı (ATP) ölçerek temizleme süreçlerinizi doğrulamak için tasarlanmış, el tipi bir alet, yenilikçi örnekleyiciler ve veri yöneticisi yazılımı içeren eksiksiz bir sanitasyon izleme sistemidir.

Ortamınızı temizledikten sonra, bir yüzeyde veya sıvılarda bulunan ATP miktarını ölçmek, temizleme işlemlerinizin etkili olduğunu doğrulamanıza olanak tanır.

Sanitasyon için küresel farkındalık artıyor ve gelecek nesiller için de öyle olacak. İster gıda güvenliği endüstrisine, ister sağlık endüstrisine, perakende endüstrisine veya başka bir sektöre hizmet ediyor olun - liste sonsuzdur - amaç diğer herkes için aynıdır: çevrenizi ve müşterilerinizi güvende tutmak.

Gıda üreticileri için temiz bir ortamın doğrulanması, üretim süreci için hayati önem taşır. Çevresel izleme programınız (EMP) ister geliştirmenin ilk aşamalarında olsun, ister uygulamadaki onuncu yılını görüyor olsun, AccuPoint Advanced NG görünmeyi görünür kılabilir. Sanitasyon etkinliği için sağlam, tutarlı ve belgelenmiş bir veri seti sağlamak, çeşitli ön koşul programları, kritik kontrol noktaları veya önleyici kontroller için kritik öneme sahiptir.

AccuPoint Advanced NG ayrıca sağlık hizmetleri için idealdir ve çevresel olarak bulaşan enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Sanitasyon prosedürlerinizi doğrulayarak, Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar (HAI) salgını olasılığını azaltmaya katkıda bulunurken, ortamınızın temizliği konusunda daha fazla güven kazanabilirsiniz.

ATP Nedir?

ATP, dünyadaki hemen hemen her canlı organizmada, hatta sizde bile enerji depolayan ve aktaran bir moleküldür. Bu bilimden yararlanan AccuPoint Gelişmiş NG cihazımız, bağlı ışık birimlerini (RLU'lar) kullanarak mevcut ATP miktarını ölçer. RLU eşikleri, etkili temizlik uygulamalarını yansıtmak için belirlenmiş kriterlere dayalıdır ve ihtiyaçlarınıza göre yükseltilebilir veya düşürülebilir. Sanitasyonunuzun etkinliğini doğrularken, ATP ne kadar azsa o kadar iyidir.

Sistemimizle ortamınızı test etmek, sanitasyon doğrulamanıza güvenmek için bir yüzey gözle görülür şekilde temiz görünse bile düşük ATP kalıntı düzeylerini doğru bir şekilde algılar.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

Eksiksiz Bir Sanitasyon İzleme Sistemi

Cihaz

Temizlik doğrulaması söz konusu olduğunda, işi yapmak için güvenilir, sağlam araçlara güvenirsiniz. Yeni AccuPoint® Advanced NG cihazı, eldiven giyerken bile çalışan yeni, kullanıcı dostu dokunmatik ekran özelliği ile ergonomik olarak tasarlanmıştır. Ek olarak, alet, daha güçlü dayanıklılık sunan ve zamanla aşınma ve yıpranma olasılığını en aza indiren kauçuk kenarlarla donatılmıştır.

Verileri ve site planlarını aktarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. AccuPoint Advanced NG cihazı, size uygun bir dizi bağlantı seçeneğiyle veri bilgilerinin hızlı ve kolay bir şekilde yüklenmesine olanak tanır - wifi özelliği dahil - kablo ihtiyacını ortadan kaldırır. Herhangi bir sorunuz olursa, Teknik Servis ekibimiz yardıma hazırdır. Uzun yıllara dayanan deneyimimizle, işe alım sorularını yanıtlamaktan denetçiler için eğitim sertifikaları sağlamaya kadar her adımda size yardımcı olmaya can atıyoruz.

AccuPoint Advanced NG cihazı, temizlik doğrulaması için endüstri standartlarını karşılar:

- Güçlü — hızlı, doğru geçiş, marjinal veya başarısız sonuçlar verir
- El tipi — kullanımı kolay ve manevrası rahat
- Sağlam — yerinde koruma için kauçuk kenarlarla artırılmış dayanıklılık


AccuPoint Advanced NG cihazı, sistemimizin sanitasyon programının etkililiğini değerlendirmek için tutarlı ve güvenilir veriler ürettiğini sıkı bir şekilde gözden geçiren üst düzey endüstri uzmanlarından harici bir doğrulama olan AOAC PTM onayını almıştır.

Örnekleyiciler

AccuPoint Advanced NG, rekabetçi, sınıfının en iyisi yüzey örnekleyicisi ile temizlik doğrulamasını basit ve kolay hale getirir. Eşsiz düz kafa örnekleyici, biyofilmleri kırarak ve tespit edilmesi zor olan bakterileri açığa çıkarırken daha fazla ATP geri kazanarak daha belirgin yüzey teması sağlar.

Dar alanlarda ATP testi yapmak baş ağrısına neden olabilir ve bazen gözden kaçabilir. Artık küçük alanlarda test yapmaktan ödün vermeyin. AccuPoint Gelişmiş erişim örnekleyici ile bir profesyonel gibi ulaşılması zor alanlarda manevra yapabilirsiniz. Sistem, sıvı numunelerde kullanım için üçüncü bir test numune alıcısı olan su numune alıcımız tarafından geliştirilmiştir.

Bu nedenle, ister yüzeyleri ister sıvı numuneleri test ediyor olun, aldığınız sonuçlara güvenebilirsiniz.

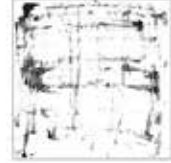

Geleneksel Swab
Numune Kalıbı



AccuPoint
Örnekleyici Kalıbı



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

Yazılım

Sadece veri almayın; yönet. AccuPoint® Advanced NG ile mesele sadece cihazlarımız ve örnekleyicilerimiz değildir; ayrıca verilerinizi etkili bir şekilde yönetmek için yazılım paketimize erişim elde edersiniz.

Sizi Destekleyecek Yazılımlar

- Birden çok rutin test planı oluşturun
- Denetim amaçları için sonuçları harmanlayın
- Sorunlu alanlara göre öneriler alın

Veri Yöneticisi Yazılımı

Veri yöneticisi yazılımı standart olarak gelir ve veri sonuçlarını zaman içinde izlemek ve trend haline getirmek için doğru bir araçtır. Yazılımı, test planlarınızı yönetmeyi kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek, test prosedürlerinizin dijital kaydını oluşturmanıza olanak sağlamak ve denetimler için gereken anlık bilgileri sağlamak üzere tasarladık.

NEOGEN® Analitik Öngörüler

NEOGEN Analytics Insights, eksiksiz bir EMP genelinde iş akışınızı yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılım aracıdır. AccuPoint Advanced NG ile, verilerinizi yönetmek için çok çeşitli özellikler ve yetenekler sunan bu platforma özel erişim elde edersiniz. NEOGEN Analytics Insights, birden fazla sitede çalışırken verilere erişimi iyileştirir ve otomatik raporlar oluşturur.

Özellik	Özellik Açıklaması	Fayda
Yayın raporlama	Kontrol panelindeki raporlardan herhangi biri için otomatik raporlama.	Gıda güvenliği uzmanları için excel önünde geçirilen sürenin azaltılması.
Test kapsamı yüzdesi	Belirli bir süre boyunca test sitelerinden kaçının test edildiğini ayrıntılarıyla belirtir.	ATP testi için performans ve standart hakkında bilgi sağlar.
Tesis ATP sonuçları karşılaştırılması	Tesise veya yere göre başarısızlık oranları.	Sanitasyon ekiplerini iyileştirmek ve yönetmek için kaynaklara odaklanın.
İstisna raporlama	Yapılandırılabilir raporlar, bir eşige ulaşıldığında oluşturulur; örneğin, bir tesisteki %5'lik bir başarısızlık oranı, gösterge tablosuna ve eşige dayalı bir rapor gönderebilir.	İstisnalara göre yönetin ve verilerin işi sizin yerinize yapmasını sağlayın. Sürekli sorun aramak yerine, sadece gerektiğinde ilgilenmenizi isteyen bir sistem oluşturun.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

AccuPoint® Advanced NG kitine neler dahildir:

Parça No.	Açıklama
9904A, 9904E, 9904P	AccuPoint Advanced NG sanitasyon izleme cihazı
9617-USB2	Kullanım kılavuzu ve AccuPoint Advanced veri yöneticisi yazılımı içeren USB parmak sürücü
9918	USB veri ve güç kablosu
1232-2	Hızlı referans rehberi
9916	Omuz askılı ve örnekleyici tutuculu kılıf
9919	Duvar şarj cihazı*
9919E	Duvar şarj cihazı ön yüzleri — U.K. ve E.U.
9919A	Duvar şarj cihazı ön yüzleri — ABD ve Brezilya
9919P	Duvar şarj cihazı ön yüzleri — Avustralya, Çin, Hindistan ve Japonya

*Not: Bölgeye bağlı olarak kit başına yalnızca bir ön yüz seti

Satın alınabilecek aksesuarlar ve öğeler:

Parça No.	Açıklama
9905	AccuPoint Advanced ATP yüzey örnekleyicileri (100 ct)
9906	AccuPoint Advanced ATP su örnekleyicileri (100 ct)
9907	AccuPoint Advanced ATP erişim örnekleyicileri (100 ct)
9619	ATP standartları kiti
9611	AccuPoint örnekleyici genişletici
9612-2	AccuPoint NG temizleme bezleri (5 swab)
9912	AccuPoint Advanced NG eControl kiti
9916	Omuz askılı ve örnekleyici tutuculu kılıf
9918	Veri ve güç iletişimi USB kablosu
9919	Duvar şarj cihazı
9919E	Duvar şarj cihazı ön yüzleri — U.K. ve E.U.
9919A	Duvar şarj cihazı ön yüzleri — ABD ve Brezilya
9919P	Duvar şarj cihazı ön yüzleri — Avustralya, Çin, Hindistan ve Japonya

NEOGEN Analizi	Açıklama	Fiyat listesi	COGS
3004	NEOGEN Analytics — Insights annual subscription	0.00	0.00



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...