

AccuPoint[®] Advanced



Gelişmiş ATP Hijyen İzleme Sistemi

Sağlam ve hafif el ünitesi
Eşsiz, yenilikçi örnekleyiciler
Sezgisel Veri Yöneticisi yazılımı



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...

HİJYEN İZLEME

"Hijyen denetimi her gıda güvenliği programının temelini oluşturmaktadır. Sürekli olarak daha fazla gıda talep eden, küresel bir nüfusun artmasıyla hijyen izlemenin önemi artacaktır. İyi bir hijyen izleme programı ürünler üretilmeden önce sorunları vurgulayabilir. bu konular erken dönemde sadece halk sağlığını korumakla kalmıyor, aynı zamanda marka bütünlüğünü de koruyor."

"AccuPoint Advanced ATP İzleme Sistemi, adenosin trifosfat (ATP) miktarını ölçerek yüzeylerde ve sıvılarda bulunan yiyecek artıkları ve mikroorganizmaları tespit ederek hijyen programınızın etkinliğini doğrular."

AccuPoint
Advanced

Hijyen izleme sistemi şunları içerir:

1. Son teknoloji ürünü örnekleyiciler
2. Geliştirilmiş okuyucu
3. Akıllı Veri Yöneticisi Yazılımı

Adım 1 - Son Teknoloji Örnekleyiciler

Sıvı kararlı kimyaya sahip üç renk kodlu örnekleyicimiz, ATP'nin yüzeylerden ve durulama sularından doğru şekilde geri kazanılmasında rakipsizdir. Diğer üreticiler tarafından kullanılan geleneksel sürüntülerin aksine, örnekleyicilerimiz ATP'yi daha tutarlı bir şekilde çıkarmak için daha geniş bir yüzey alanını kaplar.

- Sıvı kararlı kimyaya sahip örnekleyiciler
- Geliştirilmiş tekrarlanabilir sonuçlar için tutarlı reaksiyonlar
- Oda sıcaklığında iki haftaya kadar stabildir
- Patentli düz kafalı tasarım biyofilmden kopar ve yüzey temasını artırır
- Yüzey, su ve erişim örnekleyicilerinin kolay tanımlanması için renk kodlu
- Tüm örnekleyici tipleri için tek elle, tek adımda etkinleştirme



AccuPoint Erişim Örnekleyicisi

Ulaşılmaması zor alanları test etmek için. ATP'nin optimum geri kazanımı ve serbest bırakılması için sert floku polimer numune ucu içerir.



AccuPoint Yüzey Örnekleyicisi

Tutarlı örnekleme ve yüzeylerde ATP'nin iyileştirilmiş geri kazanımı için patentli düz kafa tasarımı.





AccuPoint Sıvı Örnekleyicisi

ATP varlığı için yerinde temiz durulama sıvılarını ve sıvıları doğru bir şekilde test etmek için tercih edilen örnekleyici.

Örnekleyici Hassasiyeti

AccuPoint Advanced örnekleyicinin benzersiz tasarımı, daha fazla numune doğruluğu ve tutarlılığı sağlar. Accupoint Advanced'in örnek desenine, geleneksel bir ATP yüzey sürüntüsüne kıyasla, kapsama alanındaki farkı açıkça görebilirsiniz.

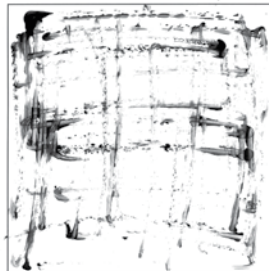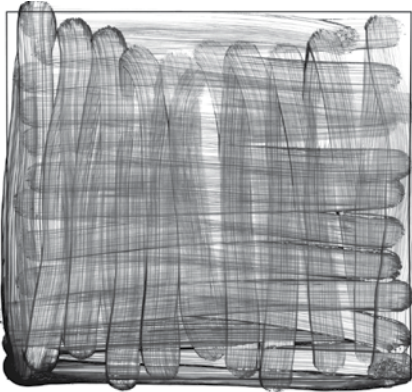

AccuPoint Advanced ATP Yüzey örnekleyici modeli

Geleneksel ATP Yüzey temizleme bezi deseni

Adım 2 - Geliştirilmiş Okuyucu

Yükseltilmiş okuyucumuz parmaklarınızın ucunda hızlı ve doğru sonuçlar verir.

- Hemen hemen her yerde test etmek için sağlam ünite
- Hızlı sonuç alma süresi: <20 saniye
- Benzersiz RLU ölçüğü, ATP temel sapmalarını tanımlamak için küçük farklılıkları tespit eder
- Geliştirilmiş güç tasarrufu özellikleri
- İsteğe bağlı RFID Teknolojisi ile okuyucu mevcuttur



İsteğe bağlı RFID Teknolojisine sahip gelişmiş okuyucu

RFID teknolojisi ATP test sonuçlarının toplanmasını kolaylaştırır. AccuPoint okuyucu uygun test sitesi bilgilerini tarar ve otomatik olarak tanımlarken test süresini büyük ölçüde azaltır. RFID etiketlerini ilk olarak tahsis ettikten sonra, tek yapmanız gereken bu etiketi ilgili siteleriyle anında ilişkilendirmek için hızlı bir taramadır.




Adım 3 - Akıllı Veri Yöneticisi Yazılımı

AccuPoint Advanced, sonuçların ve eğilimlerin net bir analizi sağlayan akıllı Veri Yöneticisi yazılımı ile birlikte gelir.

- Yüklenen tüm test sonuçlarını kaydeder ve izler
- Temel hijyen göstergesi raporları oluşturur
- Denetim uyumluluğu için kayıtlar tutar
- Eğilimleri ve sorunlu siteleri belirler
- Test planını yönetir
- Ürün yazılımı yükseltme özelliği okuyucuyu güncel tutar

Örnek Raporlar

Total	Pass	Marginal	Fail
1652	1560	15	77
100.0%	94.4%	0.9%	4.7%

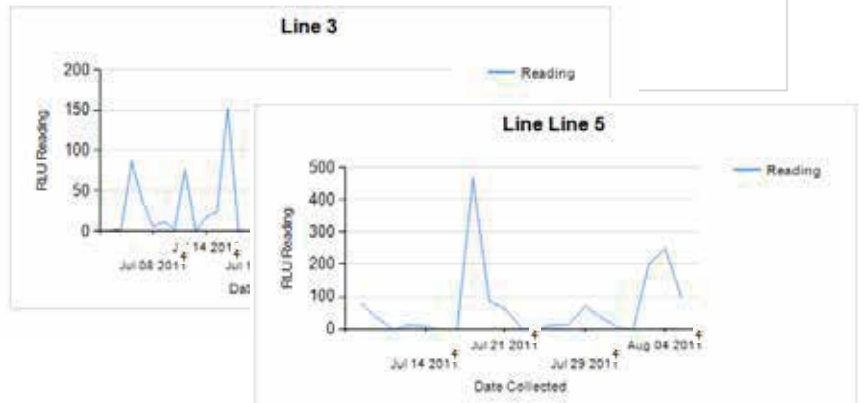

Hızlı ve Kolay Süreç



Hijyen Programınızı Güvenle Doğrulayın



Bilgilendirilmiş Kararlar

- AccuPoint Advanced sistemi, test sonuçları, test yerleri ve yüzeyi veya sıvısı olsun test türü dahil olmak üzere anında karar verme hakkında bilgi sağlar.
- Veri Yöneticisi yazılımı, hızlı bir şekilde test planları oluşturarak, verileri okuyucu ile senkronize ederek ve SSOP'ları doğrulamak için hijyen etkinliğinin nesnel bir kaydını tutarak test süreçlerini kolaylaştırır.
- Okuyucu, 4.000'e kadar benzersiz test sonucunu saklayarak hafızayı sürekli temizleme ihtiyacını ortadan kaldırır.



Önleme

- AccuPoint Advanced, masraflı geri çağırma işlemlerini önlemeye yardımcı olan hızlı kararlara izin vererek, birimdeki tüm ilgili site bilgilerini görüntüler.
- Örnekleyici tiplerinin seçimi, hijyen izlemenin gerektiğinde gerçekleştirilmesini sağlar ve yalnızca en güvenli ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlar.
- AccuPoint Advanced, üreticilerin hijyen ve önleyici kontrol programlarının gerçekten işe yaradığını doğrulamalarını sağlar.



Marka Koruması

- AccuPoint Advanced, üreticilerin markaları için en iyi kararları alabilmeleri için hızlı, doğru ve uygulanabilir sonuçlar sağlar.
- Geri çağırımlar milyonlarca ürünün kaybına ve tüketici güveninin kaybedilmesine mal olabilir. AccuPoint Advanced, potansiyel olarak yıkıcı olayları önlemeye yardımcı olabilecek ekonomik bir yatırım sağlar.



AccuPoint Advanced'in hijyen izleme programınızı iyileştirmeye nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek ve detaylı bilgi almak için bugün ABP Satış mühendislerimiz ile iletişime geçin.



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30

abp@abp.com.tr

www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...